

neno®


bella twin

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

BG



5. ОПИСАНИЕ НА ИКОНИТЕ И БУТОНИТЕ

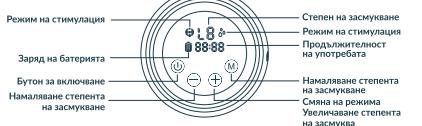

1. Бутон за включване: Натиснете и задържте бутона в продължение на 2 секунди за да стартирате помпата.
2. Промяна на режима на работа: За да промените режима на работа на помпата натиснете © бутона. Помпата автоматично ще премине от фаза на стимулация, във фаза на изцеждане след 2 минути. Помпата за кърма започва настройките Ви и разполага с таймер. Когато включите помпата за кърма, тя е запомнила Вашата настройка от последната употреба. Помпата автоматично се изключи след 30 минути.

3. Сила на засмукване: За да увеличите или снизите на засмукване на помпата, натиснете + бутона за да намалите силата на засмукване, натиснете - бутона за дислек. (Фаза на стимулация L1-L6; Фаза на изцеждане L1 - L9)

4. Статус на батерията: Показва оставащия заряд на батерията. Заредете батерията ако нивото ѝ е ниско.

5. Продължителност на употреба: Показва колко време помпата работи. Помпата ще се изключи автоматично след 30 минути работа.

6. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА



12. ПРОДЪЛЖИТЕЛНО СЪХРАНЕНИЕ

1. Помпата за кърма може да съхранява вакуумна батерия. За да спаси акумулатора от изгаряне, устройството промива въздушният резервоар на съхранение след дълъг период без употреба. За да използвате помпата на съхранение, включете устройството в електрически контакт и го заредете за 2 часа.
2. Преди да оставите помпата за кърма за дълго време, уверете се че:
 - a. Всички компоненти на помпата за кърма са чисти.
 - b. Помпеният устройство е чисто.
 - c. Батерията е напълно заредена.

13. ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ

ПОДГОТОВКА: мек сапун или друг почистващ продукт, чиста кърпа за съдове, вода с натроли за пиење.

- Части, които трябва да се мият или стерилизират:
- Фуния
 - Шийце
 - Конектор
 - Клапа
 - Засмукваща капак
 - Мембра
 - Капак на фунията

ВНИМАНИЕ:

- Измийте всички части, които са имали директен контакт с кърмата веднага след употреба. Това ще помага да избегнете остатъчни вещества и растежа на бактерии в устройството.
- Използвайте само вода с качество на пинен чешмяния или бутилирана, за да почистите уреда.
- При почистване на клапата не използвайте малки инструменти като четки.
- Внимавайте да не пробиете частта.
- Разглобете, измийте и изплъкнете всички части на устройството, които са поели директен контакт с кърмата (с изключение на помпата).

Уважаеми Клиенти,
Вие закупихте Neno Bella, който е електрическата помпа за кърма. Използва се за изцеждане на кърма след дъждане.
Моля прочетете ръководството преди употреба.

1. БЕЗОПАСНОСТ

1. Не използвайте помпата за кърма по време на бременност – тя може да причини прекършено време на раждане.
2. Не използвайте помпата, ако страдате от хронични заболявания или сърдечно-съдови заболявания, които може да направят употребата болезнена.
3. Преди всяка употреба се уверете, че нито един част от помпата за кърма не е повредена. Не използвайте устройството, ако никой от елементите му е видимо повреден.
4. Дръжте помпата далеч от деца и животни.
5. Поради хигиенни причини само един човек трябва да използва помпата за кърма.
6. Пазете изломвани части на устройството далеч от течността на течността.
7. Избегвайте да излагате устройството на механични повреди, причинени например от изпускане на предмети.
8. Не докосвате силиконовите части далеч от горещи повърхности, за да избегнете деформация на материала.
9. Преди да съхранявате изцежданата кърма, не забравяйте да почистите и стерилизирате помпата за кърма всички пат.
10. Не почистявайте устройството с абразивни почистващи препарати.
11. Не се опитвайте сами да ремонтирате помпата за кърма, това ще доведе до загуба на гаранция.
12. Ако помпата за кърма ви причинява болка и дискомфорт по време на употреба, използвайте и я премахнете от гърдите си.
13. Не почистявайте маркучка твърде често и се старайте винаги да е сух. Маркуч, който е мокър, може да причини повреда на устройството.

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Smart устройство:
 - а. 6 степени на стимулация и 9 степени на изломване;
 - б. 2-фазна технология на изломване: стимулация/изцеждане/автоматичност/памет;
 - в. 4-фазни smart функционалности: стимулация/изцеждане/автоматичност/памет.
2. Създадено специално за обратното засмукване на кърма:
3. Задържателна система за изцеждане осигурява кърмата не се връща в циркуляцията на помпата, като по този начин поддържа свежа и предизвикателна за развитие на бактерии.
4. Нежно силиконова функция:
- Гъвкавата, нежна силиконов фуния е пригната за употреба, намалява напрежението и нежно масажира гърдата за да подобри притока на кърма.
5. Тип и лека:
- Помпата е изключително лека и може да се използва дискретно навсякъде. Създадена за работещи майки, които трябва да изцеждат кърма няколко пъти на ден.

7. ПОЧИСТВАНЕ

Почистването и дезинфекцирането са две различни неща. Те трябва да се правят отделно, за да предпазите детето си и да осигурите правилното функциониране на помпата за кърма.

Почистване – почистване на повърхности и премахване на петна и замърсявания.

Стерилизация – премахване на бактериите и вирусите, които могат да присъстват по повърхностите на устройството

Функция	Части на помпата (конектор, мембра, капак)	Шийца и биберон
Приди първа употреба	Почистване и стерилизация	Почистване и стерилизация
След всяка употреба	Почистване	Почистване
Веднъз дневно	Стерилизация	Стерилизация

8. СГЛОБЯВАНЕ НА ПОМПАТА ЗА КЪРМА

1. Измийте добре ръцете си с вода и сапун, преди да докосвате гърдата и помпата за кърма.
2. Прикрепете фунията, капака и мембранията към конектора, като го завъртите по посока на часниковата стрелка, докато се навие.
3. Поставете клапана в конектора и завийте шийцата към конектора, като го завъртите по посока на часниковата стрелка, докато се навие.
4. Сгърнете маркучка към капачката за засмукване.
5. Сгърнете другата страна на маркучка към помпения устройство.

- Съвет:
- а. Преди всяка употреба проверявайте частите на помпата за кърма за повреди. Ако някои от частите излеждат повредени, сменете ги с нови.
 - б. Преди всяка употреба проверявайте дали всички части на уреда са чисти.
 - с. За да избегнете попадане на помпата за кърма, уверете се че всички неизвестни части са сухи преди употреба.

9. ЗАРЕДЖДАНЕ НА ПОМПАТА ЗА КЪРМА

Заредете помпата за кърма 2 часа преди първата употреба. За да заредите, свържете помпата към зареждане посредством USB кабела. Иконата на батерията на дисплея ще покаже пълна, когато зареждането е приключи.

Съвет:

- а. Преди всяка употреба проверявайте частите на помпата за кърма за повреди. Ако някои от частите излеждат повредени, сменете ги с нови.
- б. Преди всяка употреба проверявайте дали всички части на уреда са чисти.
- с. За да избегнете попадане на помпата за кърма, уверете се че всички неизвестни части са сухи преди употреба.

10. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОМПАТА ЗА КЪРМА

11. ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

1. Помпата не се включва: включете помпата към зареждане. Ако помпата няма заредена батерия, дисплеят ще ни дава съвети и нида да използваме за грещка.
2. Липса/Слабо засмукване: Уверете се, че всички части на помпата са правилно почиствани. Раз敏捷ете помпата и се уверете, че всички части са здрави. Слободете наново помпата, като следвате инструкциите, дадени в т.ч. Слободиране на помпата за кърма.
3. Количеството кърма е по-голямо от вместимостта на шийкото: изключете и премахнете устройството. Използвайте влажна (не мокра) кърпа и избръснете помпата. Когато всички части са сухи слободете помпата отново.

14. СПЕЦИФИКАЦИЯ

Зареждане: 110-240V 50-60Hz
Мощност: 5W 1A
Тегло: 733 g
Размери: 105x53 mm
Вид батерия: 3.7V 1400 mAh Li-Ion

15. ГАРАНЦИОННА КАРТА/РЕКЛАМАЦИИ

Този продукт има 24-месечна гаранция.


Условията на гаранцията можете да намерите на: <https://neno.pl/gwarancja>

Дани, контакти и интернет адреси можете да намерите на адрес:

<https://neno.pl/kontakt>

Спецификацията и съдържанието на комплекта могат да бъдат променени без предварително уведомление.

Извиняваме се всички за причинено неудобство.

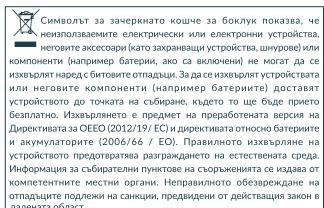

Производител:
KGK Trade sp. z o.o. sp. k.
Ul. Ujastek 5B
31-752 Krakow
Полша
Произведено в КНР.

neno®
www.neno.pl
inspired by Children,
designed by Parents